



Contenant Tyco

5 litres

- Enfoncez le couvercle sur le contenant en appuyant sur les quatre côtés. Vous devez entendre des dé clics.




- Déposez les seringues à l'horizontale dans l'ouverture.

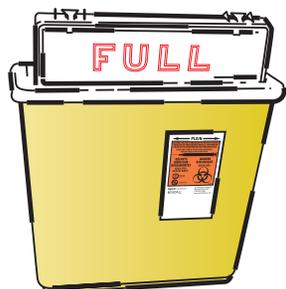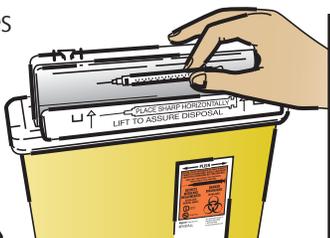

- Lorsque le contenant a atteint sa pleine capacité et que la mention «FULL» apparaît, il est temps de verrouiller le contenant de façon permanente.

- Fermez le battant en le poussant à fond et endenchez les deux pattes de fermeture qui se trouvent sur le dessus, de chaque côté. Des dé clics seront perceptibles. **Une fois verrouillé, le contenant ne peut être rouvert.**

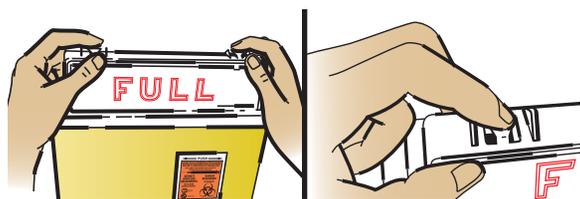

Attention!

Par respect pour les personnes qui feront la manutention de ce contenant et pour assurer leur sécurité

- Veillez à ce que l'extérieur du contenant soit propre au moment où vous le rapporterez.
- Ne jetez jamais ce contenant dans une poubelle ou dans un bac de recyclage.
- Rapportez ce contenant rempli de seringues, d'aiguilles ou de lancettes à la pharmacie, au CLSC, à une clinique spécialisée (par exemple, clinique du diabète) ou à un organisme communautaire qui offre le service d'échange de seringues.

This pamphlet is also available in english.

Votre contenant de seringues et d'aiguilles usagées



06-322-01FA

Mode d'emploi

Ce contenant est fourni gratuitement par le ministère de la Santé et des Services sociaux aux Québécois et aux Québécoises qui utilisent des seringues, des aiguilles ou des lancettes à la maison. Il a pour but d'éviter les piqûres accidentelles qui affectent particulièrement les enfants et certains travailleurs et qui pourraient causer des maladies graves.

Danger !

Pour éviter les accidents

- Conservez ce contenant hors de la portée des enfants.
- **Ne remplissez pas le contenant au-delà de la limite indiquée.**
- Fermez correctement le contenant rempli avant de le rapporter.
- Ne posez aucun objet lourd sur le contenant et prenez garde de l'écraser.

Pour éviter le gaspillage

- Déposez dans ce contenant seulement les seringues, les aiguilles et les lancettes.
- Ne déposez jamais dans ce contenant l'emballage des seringues, les bandelettes, les tampons, les cartouches de médicament ou tout autre objet.
- **Évitez de poser le couvercle ou de fermer définitivement le contenant avant qu'il soit rempli jusqu'à la limite indiquée, car il sera impossible de le rouvrir.**

Contenant BD 1,4 litre

- Pour éviter de perdre le couvercle pour fermeture définitive, il est recommandé de le fixer sur le côté du contenant avec un ruban adhésif.



- Déposez les seringues et les lancettes usagées, l'aiguille en premier, dans l'ouverture la plus rapprochée du bord.

- Pour retirer et jeter l'aiguille du stylo injecteur,
 - ne remettez pas le capuchon sur l'aiguille;
 - insérez avec soin la pointe du stylo dans l'ouverture du centre à un angle de 45 degrés et poussez-la jusqu'à ce que le stylo s'arrête;



- dévissez l'aiguille en tournant le stylo vers la gauche tout en appliquant une pression continue;



- l'aiguille tombera dans le contenant lorsque le stylo sera retiré. Attention, l'aiguille ne doit pas être vissée trop serrée au stylo;
- si l'aiguille demeure coincée dans l'ouverture, utilisez le stylo et non pas vos doigts pour la pousser dans le contenant.



- Lorsque le contenant est rempli jusqu'à la ligne pointillée, posez solidement le couvercle pour fermeture définitive.

